



Росток

динамика развития ребёнка

Документация: веб-приложение для детского психолога и логопеда

Мониторинг речевого и нейропсихологического развития группы. Замена книги Excel «Динамика речевого развития»: анализ исходного файла, описание экранов, методика расчёта, работа на телефоне.



Версия 1.5.0 · сентябрь 2026

Vite + React · данные хранятся локально

00 Содержание

01	Зачем это приложение	задачи специалиста и что упрощено
02	Анализ исходного файла Excel	листы, формулы, найденные ошибки
03	Установка и первый запуск	три способа начать
04	Экран «Дети»	группы и списки
05	Экран «Обследование»	ввод по одному ребёнку
06	Экран «Протокол группы»	таблица как в Excel
07	Экран «Динамика» и графики	статистика по группе
08	Карта ребёнка и заключение	профиль, тренд, печать
09	Программа коррекции и отчёт для родителей	упражнения, контакты, печать
10	Методика расчёта	шкала, уровни, итог
11	Работа на телефоне	адаптивная вёрстка
12	Администрирование: данные и словари	копии, импорт, словарные значения
13	Дизайн-система и устройство кода	для разработчика

01 Зачем это приложение

Специалист два раза в год обследует каждого ребёнка группы по десяткам проб, сводит результаты, строит диаграммы для отчёта и пишет заключения. «Росток» оставляет человеку только первое — поставить балл.



Что показало изучение практики

Документация педагога-психолога и учителя-логопеда ДОУ включает протоколы обследования, карты развития, журналы учёта, аналитические справки и представления на ППк. Мониторинг проводится минимум дважды в год (сентябрь и май), оценка — балльная (обычно 0–3), результат — сравнение количественных показателей начала и конца года по каждому ребёнку и группе в целом. Нейропсихологическая диагностика дошкольников (Ж. М. Глозман, Т. В. Ахутина) использует ту же логику штрафных баллов: 0 — норма, 3 — выраженное нарушение.

Что упрощает «Росток»

БЫЛО В EXCEL	СТАЛО
16 листов, фамилии связаны ссылками между листами	Ребёнок вводится один раз; новый учебный год — одна кнопка, без копирования листов
Балл выбирается из выпадающего списка в каждой ячейке	Одно нажатие или клавиша 0–3 с автопереходом к следующей пробе; «всё в норме»; «как на прошлом срезе»
Формулы суммы, среднего и уровня в каждой строке — легко сломать	Расчёт в коде, единое правило для всех разделов, пустые срезы не дают ошибок
Данные для диаграммы результативности вносились вручную на отдельный лист	Шесть видов графиков строятся сами и обновляются при каждом изменении
Нейродиагностика была только списком параметров («Лист2»)	Полноценный блок из 13 разделов и 101 параметра с тем же удобным вводом
Заключение писалось с нуля	Черновик собирается из баллов: уровни, проблемные пробы, динамика, рекомендации
Только компьютер с Excel	Любой браузер, включая телефон и планшет

02 Анализ исходного файла Excel

Книга «Динамика речевого развития 2022–2023»: 16 листов, 30 строк под детей, два учебных года, по два среза в каждом (НГ — начало года, КГ — конец года).

Структура книги

ЛИСТЫ	СОДЕРЖАНИЕ
Звук НГ/КГ 1 г, 2 г (4 листа)	Протокол звукопроизношения: 13 звуков (свистящие, шипящие, сонорные) + 4 колонки «др. звук». Шкала: 0 — нарушен, 1 — изолированный, 2 — автоматизация, 3 — норма
Фонетика НГ/КГ (4 листа)	13 проб: фонематический слух (4), анализ и синтез (7), звуко-слоговая структура (2)
Л.Г.С. НГ/КГ (4 листа)	21 проба: лексика (12), грамматический строй (6), связная речь (3)
динамика 2 года	Сводная: уровень каждого ребёнка по 5 разделам × 4 среза, итог года, подсчёт детей по уровням, таблица для диаграмм
Диаграммы, Лист1	9 диаграмм: 4 круговые по звукам, 2 гистограммы динамики, 2 круговые эффективности, 1 объёмная результативности (данные введены вручную)
Лист2	Перечень параметров для будущей системы: стадии работы над звуком, шкала 0–3 с расшифровкой и большой блок нейродиагностики. Фактически — техническое задание специалиста

Цепочка формул

Протокол (строка ребёнка)

сумма	=СУММ(C5:S5)	или	=C4+D4+...+N4
среднее	=T5/СЧЁТЗ(C5:S5)	или	=X4/12, =Z4/6, =AB4/3, =P4/13
уровень	=ЕСЛИ(ср<=0,9;0;ЕСЛИ(ср<=1,4;1;ЕСЛИ(ср<=2,4;2;ЕСЛИ(ср<=3;3))))		

Сводная «динамика 2 года»

ячейка	= 'Л.Г.С. НГ 1 г'!AD4	ссылка на уровень из протокола
итог	=(D5+N5+L5+P5+T5)/5 → =ЕСЛИ(Y5<=1,4;1;ЕСЛИ(Y5<=2,9;2;ЕСЛИ(Y5<=3;3)))	
подсчёт	=СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ(C5:C34;{"0"}))	сколько детей на уровне 0, 1, 2, 3
графики	=C35, =D35 ...	таблица-посредник для диаграмм

Найденные ошибки

ГДЕ	ЧТО НЕ ТАК
Сводная, строка 36 (уровень 1)	Диапазон сдвинут: C6 : C35 вместо C5 : C34 — первый ребёнок не учитывается, а в расчёт попадает строка итогов
Сводная, ячейка I69	Для диаграммы звукопроизношения (НГ) стоит =G35 — это столбец фонетики; должно быть =K35
Сводная, ячейка X35	Считает только до 20-й строки (X5 : X20)
Пороги уровня	В протоколах 2,4, в итоге года 2,9; на листах звуков нет уровня 0 — один и тот же средний балл даёт разный уровень
Пустые срезы	#ДЕЛ/0! на листах звуков второго года попадает в сводную и диаграммы
Средние Л.Г.С. и фонетики	Делятся на фиксированное число проб (12, 6, 3, 13): незаполненная проба считается как 0 и искажает результат
Две шкалы	Протоколы: 3 — норма. «Лист2»: 0 — норма. В одной книге «больше» значит то лучше, то хуже

В приложении принята шкала из «Лист2» (0 — норма), как в нейропсихологической диагностике. При загрузке прежнего файла баллы переводятся автоматически:
новый = 3 - старый, стадии звука: 3 → норма, 2 → автоматизация, 1 → постановка, 0 → нарушен.

03 Установка и первый запуск

Запуск

<code>npm install</code>	установка зависимостей (один раз)
<code>npm run dev</code>	рабочий режим: <code>http://localhost:5183</code>
<code>npm run build</code>	готовая статика в папке <code>dist/</code> — можно выложить на любой хостинг

Серверной части нет. Требуется Node.js 20+ для сборки; для работы — любой современный браузер.

Стартовый экран

Пока нет ни одной группы, приложение показывает четыре шага и три способа начать: создать группу, загрузить прежний файл Excel или открыть пример с вымышленными детьми.

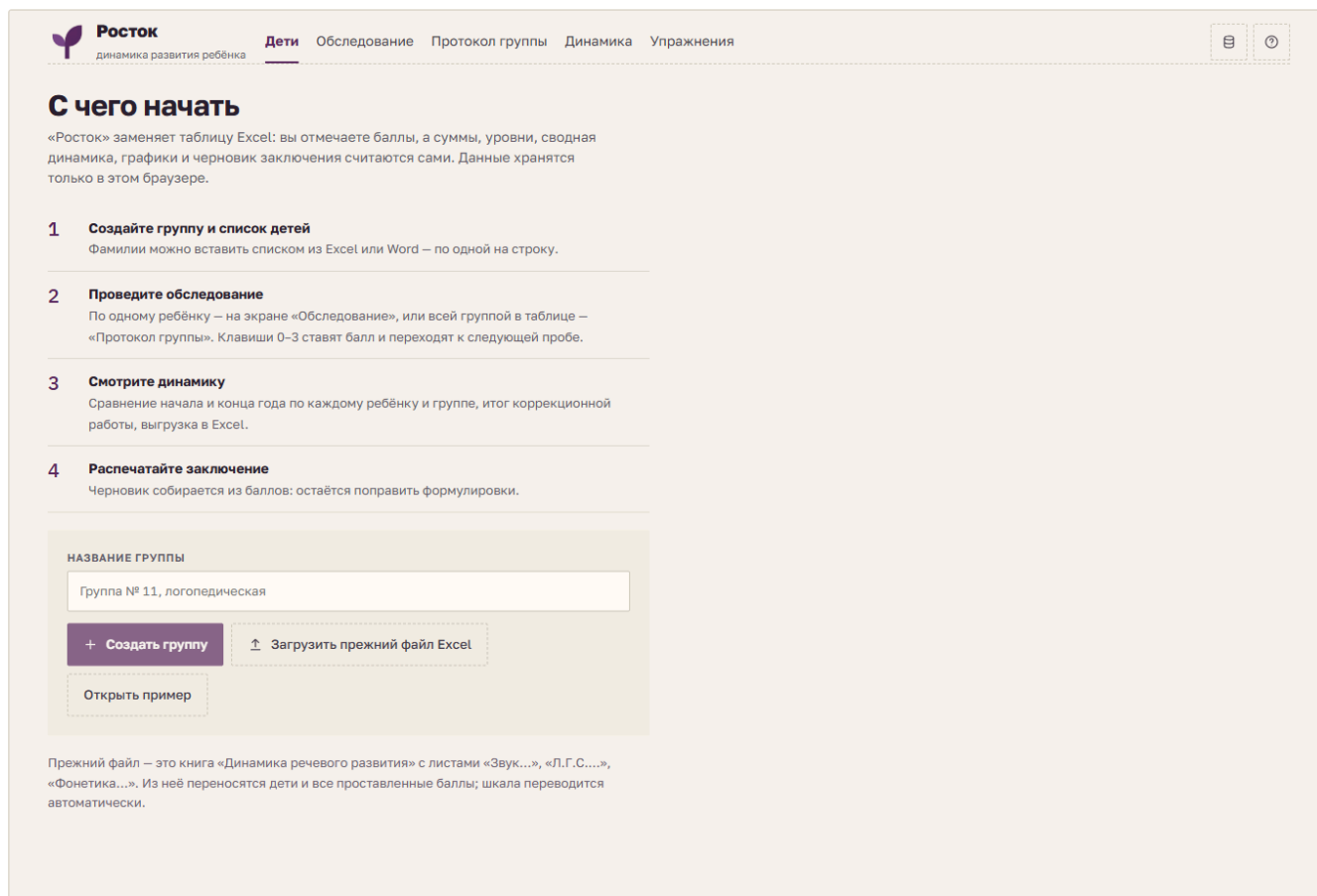


рис. 1 Стартовый экран: создание группы, загрузка книги Excel, пример

04 Экран «Дети»

Список группы и состояние обследования на выбранном срезе.

Росток

динамика развития ребёнка

Дети

Обследование

Протокол группы

Динамика

Упражнения

Дети

Список группы и состояние обследования на выбранном срезе. Нажмите на фамилию, чтобы открыть карту ребёнка.

+ Добавить детей

Новая группа

ГРУППА

СРЕЗ

ДЕТЕЙ В ГРУППЕ

Группа № 5 «Рябинка» (пример) -

2025–2026 · НГ -

12

№	РЕБЁНОК	ВОЗРАСТ	РОДИТЕЛИ	ЗАПОЛНЕНО	РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ	НЕЙРОДИАГНОСТИКА
1	Белкина Соня	6 лет 8 мес.	мама, папа	139/151	11,39	10,90 обследовать · удалить
2	Воронов Лев	6 лет 3 мес.	мама, папа, бабушка	139/151	32,22	21,76 обследовать · удалить
3	Грачёва Мила	5 лет 10 мес.	мама, папа	139/151	11,31	10,84 обследовать · удалить
4	Дроздов Тимур	6 лет 5 мес.	мама, папа	139/151	32,22	11,54 обследовать · удалить
5	Ежова Варя	6 лет	мама, папа	139/151	21,66	11,01 обследовать · удалить
6	Зайцев Платон	6 лет 7 мес.	мама, папа, бабушка	139/151	32,42	21,61 обследовать · удалить
7	Калинина Ева	6 лет 2 мес.	мама, папа	139/151	21,67	11,37 обследовать · удалить
8	Лисицын Марк	5 лет 9 мес.	мама, папа	139/151	32,26	11,51 обследовать · удалить
9	Орлова Алиса	6 лет 4 мес.	мама, папа	139/151	21,90	11,28 обследовать · удалить
10	Синицын Гриша	5 лет 11 мес.	мама, папа, бабушка	139/151	32,48	21,74 обследовать · удалить
11	Соколова Тая	6 лет 6 мес.	мама, папа	139/151	11,55	11,27 обследовать · удалить
12	Чижов Рома	6 лет 1 мес.	мама, папа	139/151	21,82	11,31 обследовать · удалить

Настройки группы

НАЗВАНИЕ

Группа № 5 «Рябинка» (пример)

Сохранить название

Удалить группу

рис. 2 Список группы: возраст считается от даты рождения, «Заполнено» – число отмеченных проб из 151, уровень и средний балл по двум блокам

- **Фильтры** «Группа» и «Срез» общие для всех экранов и запоминаются между сеансами.
- **Добавить детей** — два способа: «Один ребёнок с родителями» (фамилия, дата рождения, ТПМПК и сразу контакты родителей и родственников) или «Списком фамилий» — по одной на строку; нумерация вида «1.» или «2)» отбрасывается, поэтому колонку можно копировать прямо из Excel или Word.
- **Родители** — колонка показывает, кто из родственников записан; «добавить» ведёт в карту ребёнка.
- **Фамилия** открывает карту ребёнка, **обследовать** — экран ввода. Удаление требует подтверждения в строке.
- **Настройки группы** внизу: переименование и удаление вместе с детьми.

Дети

Список группы и состояние обследования на выбранном срезе. Нажмите на фамилию, чтобы открыть карту ребёнка.

+ Добавить детей

Новая группа

Один ребёнок с родителями **Списком фамилий**

ФАМИЛИЯ И ИМЯ – ПО ОДНОМУ РЕБЁНКУ НА СТРОКУ

Журавлёва Ника
Соловьёв Петя

Родителей и родственников можно добавить потом – в карте ребёнка.

Добавить в «Группа № 5 «Рябинка» (пример)»

Отмена

ГРУППА

СРЕЗ

ДЕТЕЙ в ГРУППЕ

Группа № 5 «Рябинка» (пример) ▾

2025–2026 · НГ ▾

12

№	РЕБЁНОК	ВОЗРАСТ	РОДИТЕЛИ	ЗАПОЛНЕНО	РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ	НЕЙРОДИАГНОСТИКА	
1	Белкина Соня	6 лет 8 мес.	мама, папа	139/151	1 1,39	1 0,90	обследовать · удалить
2	Воронов Лев	6 лет 3 мес.	мама, папа, бабушка	139/151	3 2,62	2 1,76	обследовать · удалить
3	Грачёва Мила	5 лет 10 мес.	мама, папа	139/151	1 1,31	1 0,84	обследовать · удалить

Росток — динамика развития ребёнка · данные хранятся только в этом браузере

v1.2.1

рис. 3 Форма добавления детей списком

05 Экран «Обследование»

Ввод по одному ребёнку. Слева — пробы раздела, справа — сводка по блоку и поле наблюдений. Всё сохраняется сразу, кнопки «Сохранить» нет.

Росток

динамика развития ребёнка

Дети

Обследование

Протокол группы

Динамика

Упражнения

Обследование

Отмечайте балл нажатием или с клавиатуры: цифра ставит отметку и переходит к следующей пробе, стрелки ↑ ↓ — перемещение, Backspace — очистить. Всё сохраняется сразу.

← Предыдущий

Следующий →

ГРУППА

РЕБЕНОК · 1 из 12

СРЕЗ

Группа № 5 «Рябинка» (пример)

Белкина Соня

2025–2026 · НГ

Речевое развитие

Нейродиагностика

Звуки 13/25

Фонетика 13/13

Лексика 12/12

Грамматика 6/6

Связная речь 3/3

Сводка: Белкина Соня

139/151

Фонематические процессы

ср. 1,46

1

всё в норме

очистить раздел

ФОНЕТИЧЕСКИЙ, ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ

Определение наличия звука в слове

0

1

2

3

Дифференциация звуков

0

1

2

3

Воспроизведение слоговых рядов

0

1

2

3

Различение произносимых взрослым слов

0

1

2

3

ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ

Выделение гласного звука в начале слова

0

1

2

3

Выделение согласного звука в начале слова

0

1

2

3

Выделение гласного звука в конце слова

0

1

2

3

Выделение согласного звука в конце слова

0

1

2

3

Составление слова из заданных звуков

0

1

2

3

Определение количества звуков в слове

0

1

2

3

Звуки

1,38

1

13/25

Фонетика

1,46

1

13/13

Лексика

1,42

1

12/12

Грамматика

1,33

1

6/6

Связная речь

1,33

1

3/3

НАБЛЮДЕНИЯ НА СРЕЗЕ

Поведение на обследовании, контакт, утомляемость...

открыть заключение

рис. 4 Раздел «Фонематические процессы»: шкала 0–3, рядом с пробой — значение прошлого среза («было: 2»)

Быстрый ввод

ДЕЙСТВИЕ	КАК
Поставить балл	Нажать на квадрат или клавишу 0–3: отметка ставится, курсор переходит к следующей пробе. Повторное нажатие снимает отметку
Перемещение	Стрелки ↑ ↓; Backspace — очистить текущую пробу
Всё в норме	Заполняет раздел нулями — остаётся исправить отдельные пробы
Как на срезе...	Копирует отметки раздела с предыдущего среза: на конец года правятся только изменения
Предыдущий / Следующий	Переход между детьми группы без возврата к списку

Звукопроизношение

Для звука отмечается этап работы: **Н** норма, **Д** дифференциация, **А** автоматизация, **П** постановка / вызывание, **Х** нарушен. Добавлены звуки раннего онтогенеза из «Лист2». Пустые звуки в расчёт не входят.

**Росток**
динамика развития ребёнка

Дети **Обследование** Протокол группы Динамика Упражнения



Обследование

Отмечайте балл нажатием или с клавиатуры: цифра ставит отметку и переходит к следующей пробе, стрелки ↑ ↓ — перемещение, Backspace — очистить. Всё сохраняется сразу.

← Предыдущий Следующий →

ГРУППА
Группа № 5 «Рябинка» (пример)

РЕБЁНОК - 1 ИЗ 12
Белкина Соня

СРЕЗ
2025-2026 - НГ

Речевое развитие Нейродиагностика

Звуки 13/25 Фонетика 13/13 Лексика 12/12 Грамматика 6/6 Связная речь 3/3

Звукопроизношение ср. 1,38 **1**

всё в норме [очистить раздел](#)

Отмечайте только обследованные звуки: пустые в расчёт не входят.

СВИСТЯЩИЕ

с	Н	Д	А	П	Х
сь	Н	Д	А	П	Х
з	Н	Д	А	П	Х
зь	Н	Д	А	П	Х
ц	Н	Д	А	П	Х

ШИПЯЩИЕ

ш	Н	Д	А	П	Х
ж	Н	Д	А	П	Х
щ	Н	Д	А	П	Х
ч	Н	Д	А	П	Х

Сводка: Белкина Соня 139/151

Звуки 1,38 **1** 13/25

Фонетика 1,46 **1** 13/13

Лексика 1,42 **1** 12/12

Грамматика 1,33 **1** 6/6

Связная речь 1,33 **1** 3/3

НАБЛЮДЕНИЯ НА СРЕЗЕ

Поведение на обследовании, контакт, утомляемость...

[открыть заключение](#)

рис. 5 Раздел «Звукопроизношение»: 25 звуков в четырёх группах

Нейродиагностика

13 разделов: общие сведения, профиль латеральной организации (глаз, рука, нога), нейродинамика, стратегия сканирования зрительного поля, память, программирование и контроль, двигательная сфера, гнозис, речь, письменная речь, мышление, ошибки и наблюдаемые симптомы (есть / нет).

Обследование

Отмечайте балл нажатием или с клавиатуры: цифра ставит отметку и переходит к следующей пробе, стрелки ↑ ↓ — перемещение, Backspace — очистить. Всё сохраняется сразу.

← Предыдущий

Следующий →

ГРУППА

Группа № 5 «Рябинка» (пример)

РЕБЕНОК · 1 из 12

Белкина Соня

СРЕЗ

2025-2026 · НГ

Речевое развитие

Нейродиагностика

Общие сведения 14/14

Латеральность 3/3

Нейродинамика 8/8

Сканирование 1/1

Память 5/5

Программирование 6/6

Моторик

Сводка: Белкина Соня

139/151

Общие сведения ср. 0,57 0

всё в норме [очистить раздел](#)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Уровень общих знаний	0	1	2	3
Возможность контакта	0	1	2	3
Негативизм	0	1	2	3
Повышенная отвлекаемость	0	1	2	3
Полевое поведение	0	1	2	3
Эмоциональный фон	0	1	2	3
Эмоциональные реакции	0	1	2	3
Напряжённость, тревожность	0	1	2	3
Агрессия, аутоагрессия	0	1	2	3
Внимание	0	1	2	3

Общие сведения	0,57	0	14/14
Латеральность			3/3
Нейродинамика	1,00	1	8/8
Сканирование			1/1
Память	1,00	1	5/5
Программирование	1,17	1	6/6
Моторика	1,00	1	11/11
Гнозис	0,50	0	10/10
Речь	1,00	1	11/11
Письмо и чтение	0,00	1	5/5
Мышление	1,00	1	4/4
Ошибки	есть: 0		4/4
Симптомы	есть: 2		10/10

НАБЛЮДЕНИЯ НА СРЕЗЕ

Поведение на обследовании, контакт, утомляемость...

рис. 6 Блок «Нейродиагностика», раздел «Общие сведения»; в сводке справа — уровень каждой сферы

Обследование

Отмечайте балл нажатием или с клавиатуры: цифра ставит отметку и переходит к следующей пробе, стрелки ↑ ↓ — перемещение, Backspace — очистить. Всё сохраняется сразу.

← Предыдущий

Следующий →

группа

Группа № 5 «Рябинка» (пример)

РЕБЕНОК · 1 из 12

Белкина Соня

СРЕЗ

2025-2026 · НГ

Речевое развитие

Нейродиагностика

Общие сведения 14/14

Латеральность 3/3

Нейродинамика 8/8

Сканирование 1/1

Память 5/5

Программирование 6/6

Моторика

Сводка: Белкина Соня

139/151

Наблюдаемые симптомы

везде «нет» [очистить раздел](#)

симптомы

Аутоstimуляции	нет	есть
Ходьба на цыпочках	нет	есть
Тики	нет	есть
Мастурбация	нет	есть
Заикание, речевые запинки	нет	есть
Эхолалии	нет	есть

Общие сведения

0,57 14/14

Латеральность

3/3

Нейродинамика

1,00 8/8

Сканирование

1/1

Память

1,00 5/5

Программирование

1,17 6/6

Моторика

1,00 11/11

Гнозис

0,50 10/10

Речь

1,09 11/11

Письмо и чтение

0,88 5/5

Росток — динамика развития ребёнка · данные хранятся только в этом браузере

v1.2.1

рис. 7 Раздел «Наблюдаемые симптомы»: отметки «нет / есть», кнопка «везде „нет“»

06 Экран «Протокол группы»

Привычная таблица: дети по строкам, пробы по столбцам. Удобно, когда обследование идёт фронтально или данные переносятся с бумажных бланков.

Росток динамика развития ребёнка Дети Обследование Протокол группы Динамика Упражнения														
Протокол группы Таблица как в Excel: дети по строкам, пробы по столбцам. Нажатие по ячейке перебирает отметки; с клавиатуры — цифры, стрелки, Backspace. Сумма, среднее и уровень считаются сами. Выгрузить протоколы в Excel														
ГРУППА					СРЕЗ					РАЗДЕЛ				
Группа № 5 «Рябинка» (пример)					2025–2026 · НГ					Фонематические процессы				
РЕБЁНОК	ФОНЕТИЧЕСКИЙ, ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ				ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ								ЗВУКО-СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА	
	Наличие звука	Дифференц.	Слог, ряды	Различ. слов	Гласн. в начале	Согл. в начале	Гласн. в конце	Согл. в конце	Синтез слова	Коп-во звуков	Слова в предл.	Слог. структура	Повтор предл.	
Белкина Соня	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	19 1,46 1
Воронов Лев	2	3	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	32 2,46 3
Грачёва Мила	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	17 1,31 1
Дроздов Тимур	2	2	1	2	3	2	2	2	2	3	3	3	2	29 2,23 3
Ежова Варя	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	19 1,46 1
Зайцев Платон	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	2	29 2,23 3
Калинина Ева	3	1	1	2	2	2	3	2	3	1	2	2	1	25 1,92 2
Лисицын Марк	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	29 2,23 3
Орлова Алиса	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	29 2,23 3
Синицын Гриша	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	35 2,69 3
Соколова Тая	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	28 1,54 1
Чижев Рома	1	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2	1	2	24 1,85 2
0 — возрастная норма														0
1 — функции в процессе формирова...														37
2 — несоответствие возрастной но...														87
3 — выраженное несоответствие н...														32
ДЕТИ ПО УРОВНЯМ РАЗДЕЛА · 12 ИЗ 12														
0 0 1 4 2 2 3 6														

рис. 8 Протокол фонематических процессов: активная строка подсвечена, справа Σ, среднее и уровень, внизу — сколько детей получили каждый балл по пробе

- **Нажатие по ячейке** перебирает отметки по кругу: пусто → 0 → 1 → 2 → 3 → пусто.
- **С клавиатуры:** цифра ставит балл и сдвигает вправо, в конце строки — на следующего ребёнка (как Tab в Excel); стрелки перемещают, Backspace очищает.
- **Первая колонка закреплена** — при горизонтальной прокрутке фамилии остаются на месте.
- **Выгрузить протоколы в Excel** — книга .xlsx: по листу на каждый раздел, с суммой, средним и уровнем.

Протокол группы

Таблица как в Excel: дети по строкам, пробы по столбцам. Нажатие по ячейке перебирает отметки; с клавиатуры – цифры, стрелки, Backspace. Сумма, среднее и уровень считаются сами.

⬇ Выгрузить протоколы в Excel

ГРУППА	СРЕЗ	РАЗДЕЛ
Группа № 5 «Рябинка» (пример)	2025–2026 · НГ	Звукопроизношение

РЕБЁНОК	СВИСТЯЩИЕ					ШИПЯЩИЕ				СОНОРНЫЕ				ЗВУКИ РАННЕГО ОНТОГЕНЕЗА																Σ	ср.	ур.
	с	сь	з	зь	ц	ш	ж	щ	ч	л	ль	р	рь	гл.	б	п	в	ф	г	к	д	т	м	н	х							
Белкина Соня	Д	А	А	Д	А	Д	Д	А	Д	Д	Д	Д	А	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	1,38	1			
Воронов Лев	А	х	х	П	А	П	П	А	А	А	х	А	х													33	2,54	3				
Грачёва Мила	А	Д	Д	А	Д	Д	А	Д	А	А	Д	Д	Д													18	1,38	1				
Дроздов Тимур	А	А	А	А	х	А	х	А	А	П	х	х	А													31	2,38	3				
Ежова Варя	А	А	А	А	А	Д	А	А	А	А	А	А	Д													24	1,85	2				
Зайцев Платон	х	х	А	х	А	А	А	А	А	А	х	А	А													30	2,31	3				
Калинина Ева	А	Д	А	Д	х	А	х	А	Д	Д	А	А	П													25	1,92	2				
Лисицын Марк	П	А	Д	А	Д	А	А	П	А	А	А	А	А													26	2,00	2				
Орлова Алиса	Д	Д	А	А	Д	Д	А	А	Д	Д	А	А	х													21	1,62	2				
Синицын Гриша	А	х	А	А	А	А	х	П	П	А	А	П	х													32	2,46	3				
Соколова Тая	А	А	Д	Д	Д	Д	А	Д	А	А	А	А	А													21	1,62	2				
Чижов Рома	А	А	Д	Д	Д	А	А	А	х	А	А	А	А													24	1,85	2				

Н – норма																																0
Д – дифференциация	2	3	4	4	5	5	1	2	3	3	2	2	2																			38
А – автоматизация	8	6	7	6	5	6	7	8	7	8	7	8	6																			89
П – постановка / вызывание	1				1		1	2	1	1		1	1																			10
х – нарушен	1	3	1	1	2		3		1		3	1	3																			19


ДЕТИ ПО УРОВНЯМ РАЗДЕЛА · 12 ИЗ 12



рис. 9 Протокол звукопроизношения: буквы этапов на цветовой подложке уровня

07 Экран «Динамика» и графики

Сравнение двух срезов по группе. По умолчанию — начало и конец последнего года, где заполнены оба среза; любую пару можно выбрать вручную.

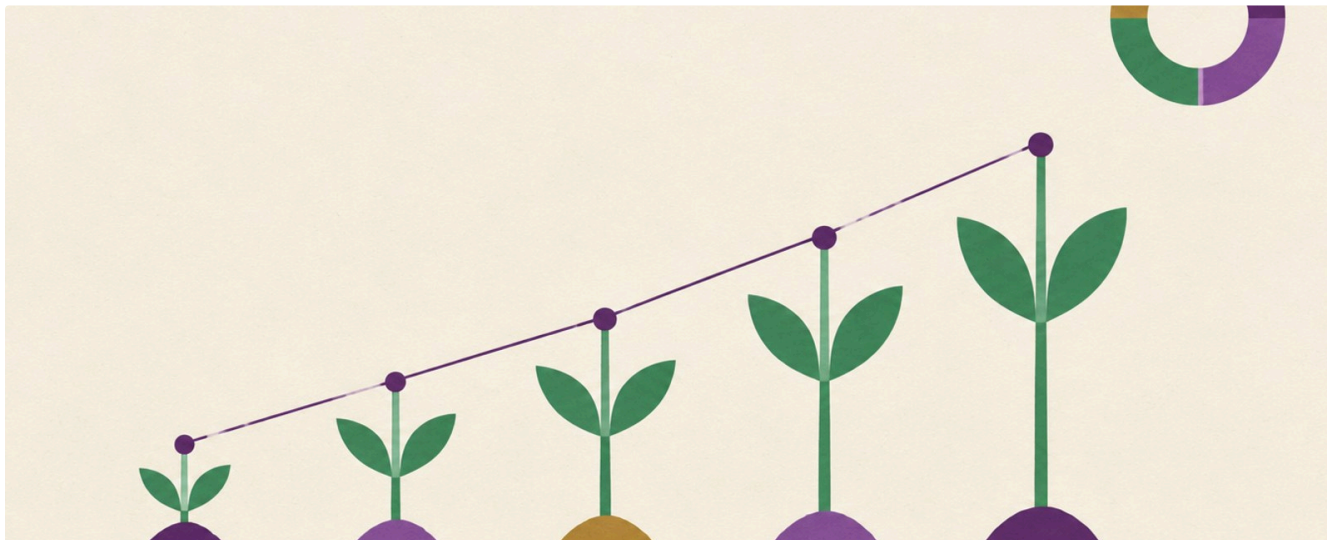

Показатели

Три числа под фильтрами: сколько детей обследовано на обоих срезах, средний балл группы с изменением (зелёное — балл снизился, то есть стало лучше) и доля детей с положительной динамикой.

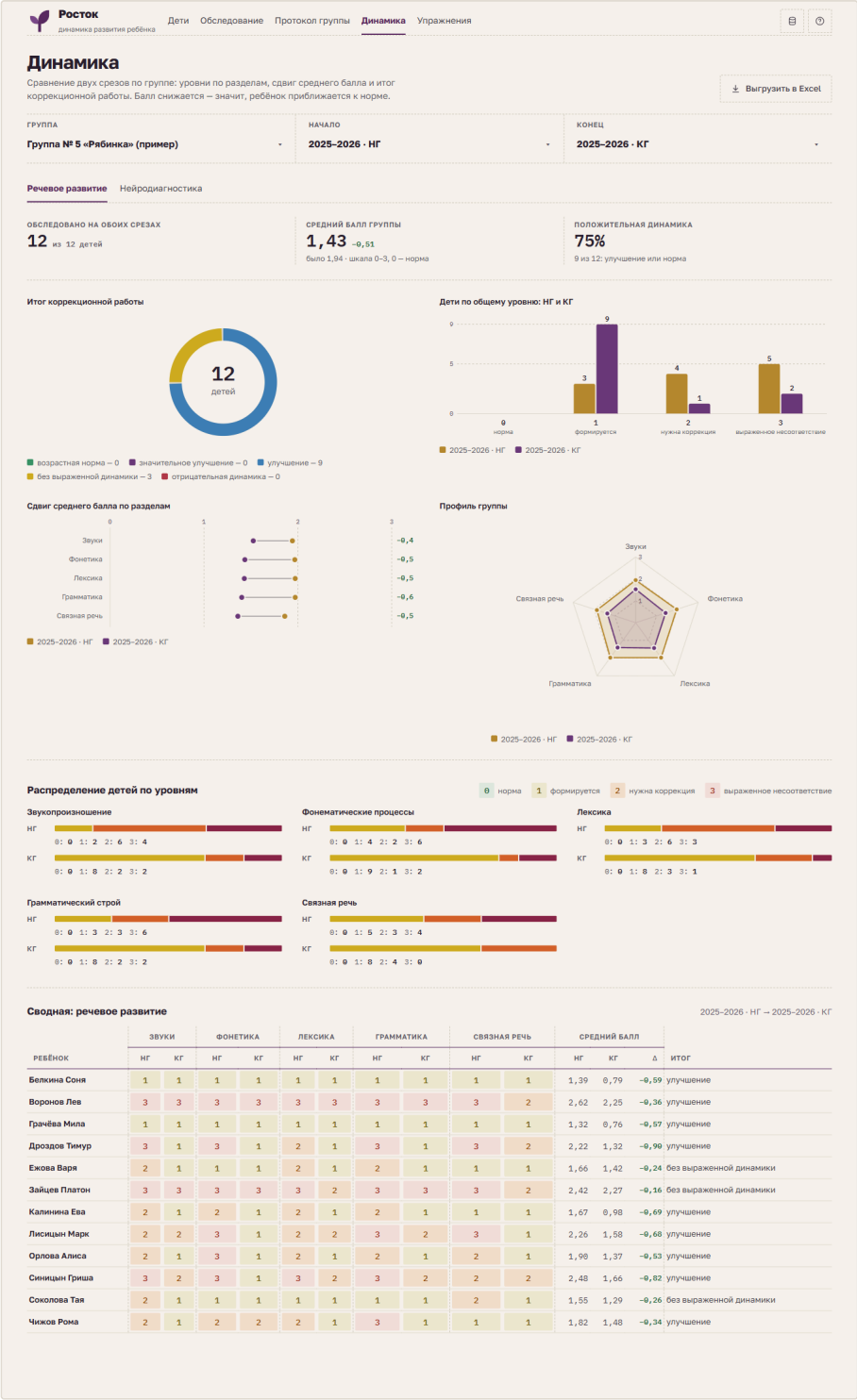


рис. 10 Экран «Динамика», блок «Речевое развитие»

Шесть видов графиков

ГРАФИК	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
Кольцо «Итог работы»	Доли детей по итогам: норма, значительное улучшение, улучшение, без динамики, отрицательная динамика. Заменяет круговые диаграммы «Эффективность логопедической работы»
Столбцы по уровням	Сколько детей на уровнях 0–3 в начале и в конце. Заменяет гистограммы «Динамика речевого развития группы»
«Гантели» по разделам	Средний балл раздела: точка начала, точка конца, линия сдвига и величина изменения справа
Радар «Профиль»	Форма профиля группы или ребёнка: чем ближе контур к центру, тем ближе к норме
Полосы распределения	По каждому разделу – состав группы по уровням на двух срезах, с числами под полосой
Линия тренда	В карте ребёнка: средний балл по речи от среза к срезу за все годы

Цвета графиков: начало, конец; уровни 0 1 2 3. Палитры проверены на различимость при нарушениях цветового зрения; рядом с цветом всегда есть число или подпись. При наведении (на телефоне – касании) появляется подсказка с точными значениями.

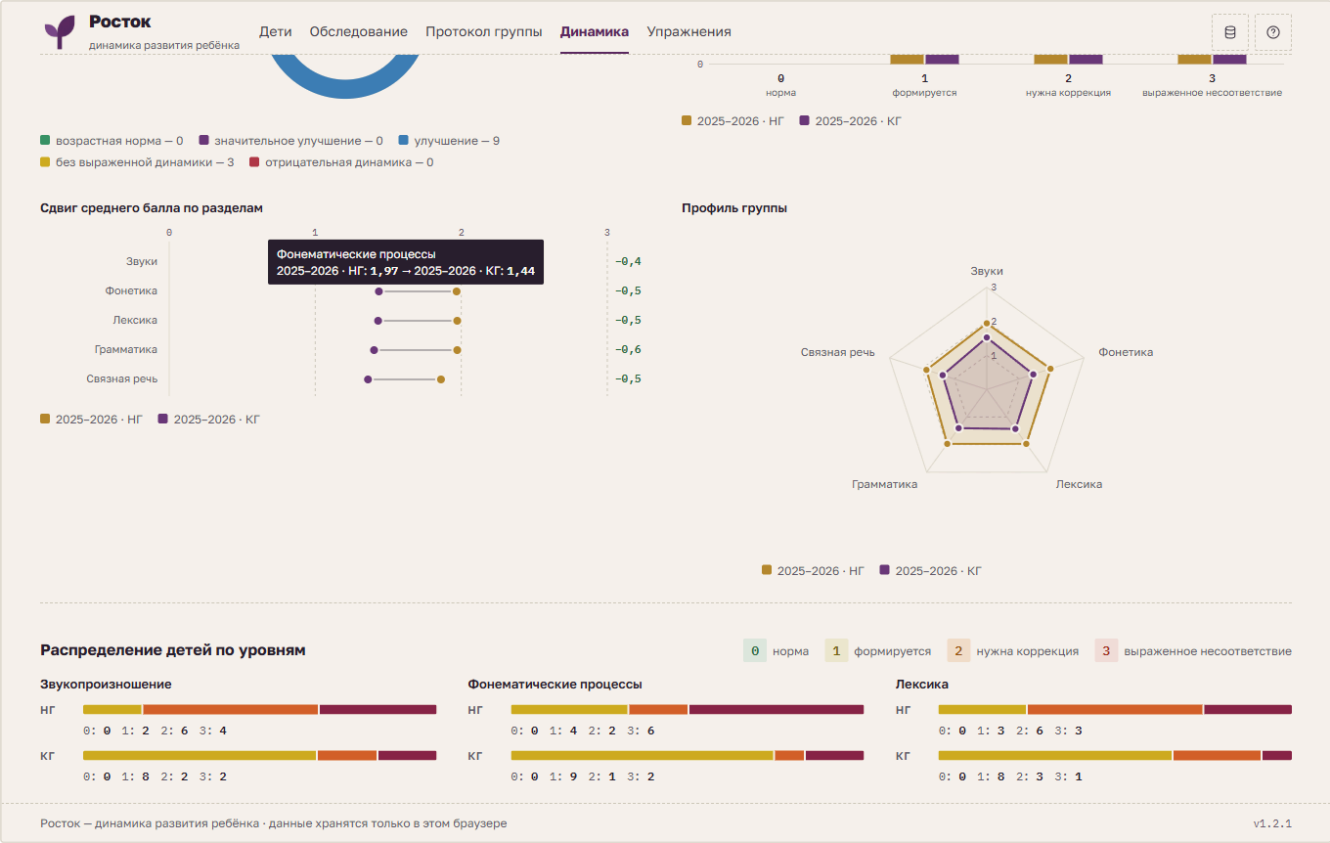


рис. 11 Подсказка при наведении на строку графика сдвига

Сводная таблица

Внизу экрана — аналог листа «динамика 2 года»: уровень каждого ребёнка по разделам на двух срезах (теплокарта), средний балл, изменение и итог. «Выгрузить в Excel» сохраняет её вместе с подсчётом детей по уровням.

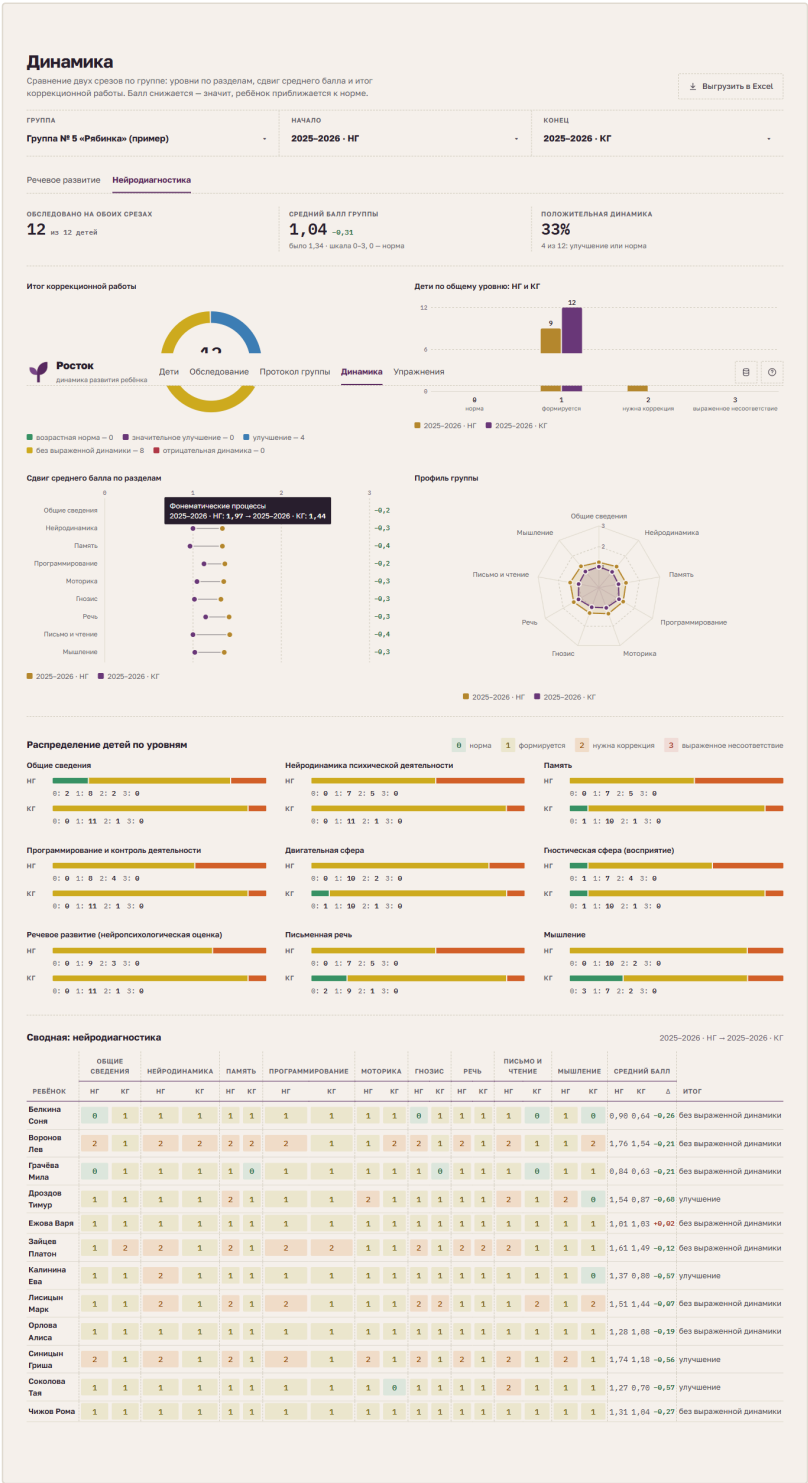


рис. 12 Те же графики для блока «Нейродиагностика»: 10 сфер

08 Карта ребёнка и заключение

[illegible]

рис. 13 Карта ребёнка: сведения, показатели, речевой профиль, тренд, нейропрофиль, уровни по всем срезам

Профиль и динамика

- **Сведения:** фамилия и имя, дата рождения, заключение ТПМПК, заметки.
- **Показатели:** средний балл и уровень по каждому блоку на последнем срезе, изменение от первого среза, итог по речи.
- **Графики:** радар речевого профиля (первый и последний срез), линия среднего балла по всем срезам, «гантели» по сферам нейродиагностики.

- **Уровни по всем срезам:** таблица-теплокарта, в последней строке — сколько проб заполнено.

Заключение

Вкладка «Заключение» собирает текст из баллов выбранного среза: по каждому разделу — формулировка уровня, средний балл, перечень проб, требующих коррекции и находящихся в процессе формирования, для звуков — группировка по этапам работы, сравнение с предыдущим срезом, рекомендации для разделов с уровнем 2–3, итог речевого развития и наблюдения специалиста. Текст правится прямо на странице; кнопки — «Печать», «Копировать текст», «Собрать заново из баллов».

Росток
динамика развития ребёнка

Дети | Обследование | Протокол группы | Динамика | Упражнения

Воронов Лев
Группа № 5 «Рябинка» (пример) · 6 лет 3 мес.

Обследовать | **Отчёт для родителей**

Профиль и динамика | Программа коррекции | **Заключение**

СРЕЗ | **СРАВНЕНИЕ**
2026–2027 · НГ | с 2025–2026 · КГ

Печать | Копировать текст | Собрать заново из баллов

Это черновик: текст можно править прямо здесь. Правки не сохраняются — скопируйте или распечатайте готовый вариант.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Ребёнок: Воронов Лев, дата рождения 08.06.2020 (6 лет 3 мес.)
Группа: Группа № 5 «Рябинка» (пример)
Срез: 2026–2027 учебный год, начало года

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

— Звукопроизношение: не соответствует возрастной норме, необходима коррекция (средний балл 1,62, уровень 2). Звуки: автоматизация — [с], [сь], [з], [зь], [ц], [ж], [ч], [л]; дифференциация — [ш], [щ], [ль], [р], [рь]. Динамика положительная (было 2,54).

— Фонематические процессы: не соответствует возрастной норме, необходима коррекция (средний балл 1,92, уровень 2). Требуют коррекции: определение наличия звука в слове; дифференциация звуков; различение произносимых взрослых слов; выделение гласного звука в начале слова; выделение согласного звука в начале слова; выделение гласного звука в конце слова; составление слова из заданных звуков; определение количества звуков в слове; определение количества, последовательности и места слов в предложении; употребление слов разной слоговой структуры; повтор предложения сложной слоговой структуры. Формируются: воспроизведение слоговых рядов; выделение согласного звука в конце слова. Динамика положительная (было 2,23).

— Лексика: не соответствует возрастной норме, необходима коррекция (средний балл 1,67, уровень 2). Требуют коррекции: понимание логико-грамматических конструкций; объяснение значения слов; части предметов; обобщение слова по группе однородных предметов; детёныши животных; подбор антонимов (высокое — низкое); кто как голос подаёт?; кто как передвигается?. Формируются: подбор определений к предметам (какой, какая...); образование относительных прилагательных (из чего?); образование

рис. 14 Черновик заключения. При печати шапка приложения и кнопки скрываются

Заключение — черновик, а не диагноз: формулировки и рекомендации специалист проверяет и дополняет сам.

09 Программа коррекции и отчёт для родителей

Три связанные возможности: библиотека упражнений по каждой пробе, программа коррекции ребёнка по выявленным дефицитам и отчёт только по одному ребёнку — для встречи с родителями, печати или отправки файлом.

Родители и родственники

У каждого ребёнка — список контактов без ограничения числа. В карточке контакта: **кем приходится** (выпадающий список: мама, папа, бабушка, опекун...), ФИО, отметка «законный представитель», **несколько телефонов** с видом (мобильный, рабочий, домашний), **несколько адресов эл. почты** и **несколько адресов** с видом (проживания, регистрации), примечание — удобное время для связи, кто забирает из сада. «+ телефон», «+ почта», «+ адрес» добавляют строку, значок корзины удаляет её.

Варианты «Кем приходится», видов телефонов и адресов — словарные значения: их меняют в «Администрирование → Словари». Карточка построена на одной сетке из трёх колонок — «вид | значение | действие»: роль, вид телефона и адреса, «эл. почта» и «примечание» стоят в левой колонке, ФИО и значения — в средней, кнопки удаления — в правой. Все поля одной высоты; «Законный представитель» и ссылки «+ телефон · + почта · + адрес» собраны в одну строку под контактом, контакты разделены пунктиром. На телефоне вид и кнопка удаления стоят строкой над значением. Пустые строки и контакты без ФИО и телефона не сохраняются.

Дети

Росток
динамика развития ребёнка

Дети | Обследование | Протокол группы | Динамика | Упражнения

Один ребёнок с родителями | Списанием фамилий

ФАМИЛИЯ И ИМЯ РЕБЁНКА | ДАТА РОЖДЕНИЯ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЛПМК

Родители и родственники

кем приходится | ФИО | примечание

мама | Фамилия Имя Отчество | Удобное время для связи, кто забирает ребёнка...

мобильный | +7 ... | *

рабочий | +7 ... | *

эл. почта | name@example.ru | *

проживания | Город, улица, дом, квартира | *

☒ Законный представитель | + телефон | + почта | + адрес

папа | Фамилия Имя Отчество | Удобное время для связи, кто забирает ребёнка...

мобильный | +7 ... | *

рис. 15 Добавление одного ребёнка сразу с родителями

(латеральность, ошибки, симптомы) в программу не попадают, поэтому в библиотеке их нет.

Росток

динамика развития ребёнка

Дети
Обследование
Протокол группы
Динамика
Упражнения

Упражнения

Библиотека: к каждой диагностической пробе — свой блок упражнений. Из неё собирается программа коррекции ребёнка по выявленным дефицитам. Одна строка — одно упражнение; изменения сохраняются сразу.

Сейчас заполнено 95 из 134 проб. Это образцы: замените их своими или очистите библиотеку. Удобно заполнять в Excel: выгрузите шаблон, впишите упражнения в последнюю колонку (новая строка в ячейке — Alt+Enter) и загрузите файл обратно.

Шаблон Excel

Загрузить из Excel

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Звуки

25/25

Фонетика

13/13

Лексика

12/12

Грамматика

6/6

Связная речь

3/3

НЕЙРОДИАГНОСТИКА

Общие сведения

0/14

Нейродинамика

0/8

Сканирование

0/1

Память

6/6

Программирование

6/6

Моторика

11/11

вернуть образцы

очистить всё

Звукопроизношение

25/25

Звук [с]

Артикуляционная гимнастика: «Улыбка», «Заборчик», «Лопаточка», «Почистим нижние зубки», «Горка» — по 5–7 раз, ежедневно.

Воздушная струя: «Загони мяч в ворота», «Сдуй снежинку» — длительный выдох по середине языка.

Постановка / уточнение артикуляции звука [с] по подражанию и с опорой на зеркало.

Автоматизация [с]: в слогах — в словах (начало, середина, конец) — в чистоговорках и стихах.

Дифференциация [с] с близкими звуками: «Найди картинку», «Два домика», повторение пар слов.

Звук [сь]

Артикуляционная гимнастика: «Улыбка», «Заборчик», «Лопаточка», «Почистим нижние зубки», «Горка» — по 5–7 раз, ежедневно.

Воздушная струя: «Загони мяч в ворота», «Сдуй снежинку» — длительный выдох по середине языка.

Постановка / уточнение артикуляции звука [сь] по подражанию и с опорой на зеркало.

Автоматизация [сь]: в слогах — в словах (начало, середина, конец) — в чистоговорках и стихах.

Дифференциация [сь] с близкими звуками: «Найди картинку», «Два домика», повторение пар слов.

Звук [э]

Артикуляционная гимнастика: «Улыбка», «Заборчик», «Лопаточка», «Почистим нижние зубки», «Горка» — по 5–7 раз, ежедневно.

Воздушная струя: «Загони мяч в ворота», «Сдуй снежинку» — длительный выдох по середине языка.

Постановка / уточнение артикуляции звука [э] по подражанию и с опорой на зеркало.

Автоматизация [э]: в слогах — в словах (начало, середина, конец) — в чистоговорках и стихах.

Дифференциация [э] с близкими звуками: «Найди картинку», «Два домика», повторение пар слов.

Звук [эь]

Артикуляционная гимнастика: «Улыбка», «Заборчик», «Лопаточка», «Почистим нижние зубки», «Горка» — по 5–7 раз, ежедневно.

Воздушная струя: «Загони мяч в ворота», «Сдуй снежинку» — длительный выдох по середине языка.

Постановка / уточнение артикуляции звука [эь] по подражанию и с опорой на зеркало.

Автоматизация [эь]: в слогах — в словах (начало, середина, конец) — в чистоговорках и стихах.

Дифференциация [эь] с близкими звуками: «Найди картинку», «Два домика», повторение пар слов.

Звук [и]

рис. 18 Библиотека упражнений, раздел «Звукопроизношение»

- **Шаблон Excel** — выгружает все пробы с кодами и текущими упражнениями. Упражнения вписываются в последнюю колонку, новая строка в ячейке — Alt+Enter. Колонку «Код» менять нельзя: по ней файл сопоставляется с пробами.
- **Загрузить из Excel** — обновляет пробы с заполненной ячейкой; пустые ячейки ничего не стирают.
- **Вернуть образцы / очистить всё** — в приложении есть образцы упражнений для речевого блока и части нейродиагностики; их можно заменить своими или удалить.

Программа коррекции

Вкладка «Программа коррекции» в карте ребёнка. Программа собирается автоматически по выбранному срезу:

- **дефицит** – проба с баллом не ниже порога: «уровень 2–3» (нужна коррекция) или «уровень 1–3» (включая формирующиеся); звуки – все, кроме нормы; стратегия сканирования – если не сформирована;
- пробы сгруппированы по разделам; у раздела – средний балл, уровень и направление работы;

- к каждой пробе подставляются упражнения из библиотеки; снятая отметка исключает пробу из программы;
- «+ дополнить для этого ребёнка» — свои упражнения, дозировка, материал только для этого ребёнка;
- внизу — два поля: «Рекомендации специалиста» и «Рекомендации родителям (занятия дома)».

Всё сохраняется сразу, отдельно для каждого среза: программа на начало года и программа на конец года не смешиваются.

Росток
динамика развития ребёнка

Дети Обследование Протокол группы Динамика Упражнения

Воронов Лев
Группа № 5 «Рябинка» (пример) · 6 лет 3 мес.

Обследовать Отчёт для родителей

Профиль и динамика **Программа коррекции** Заключение

СРЕЗ ОБСЛЕДОВАНИЯ	ЧТО СЧИТАТЬ ДЕФИЦИТОМ	В ПРОГРАММЕ
2026–2027 · НГ	уровень 2–3: нужна коррекция	61 из 61 проб

Печать программы Отчёт для родителей

Программа строится по пробам с дефицитом: звуки — все, кроме нормы; остальные пробы — по выбранному порогу. Снимите отметку, чтобы исключить пробу; допишите свои упражнения к пробе или общие рекомендации внизу — всё сохраняется сразу.

Речевое развитие

Звукопроизношение ср. 1,62 2

Направление работы: индивидуальные занятия по постановке, автоматизации и дифференциации нарушенных звуков; артикуляционная гимнастика ежедневно.

☒ Звук [с] A

- Артикуляционная гимнастика: «Улыбка», «Заборчик», «Лопаточка», «Почистим нижние зубки», «Горка» — по 5–7 раз, ежедневно.
- Воздушная струя: «Загони мяч в ворота», «Сдуй снежинку» — длительный выдох по середине языка.
- Постановка / уточнение артикуляции звука [с] по подражанию и с опорой на зеркало.
- Автоматизация [с]: в слогах — в словах (начало, середина, конец) — в чистоговорках и стихах.
- Дифференциация [с] с близкими звуками: «Найди картинку», «Два домика», повторение пар слов.

+ дополнить для этого ребёнка

☒ Звук [сь] A

- Артикуляционная гимнастика: «Улыбка», «Заборчик», «Лопаточка», «Почистим нижние зубки», «Горка» — по 5–7 раз, ежедневно.
- Воздушная струя: «Загони мяч в ворота», «Сдуй снежинку» — длительный выдох по середине языка.
- Постановка / уточнение артикуляции звука [сь] по подражанию и с опорой на зеркало.
- Автоматизация [сь]: в слогах — в словах (начало, середина, конец) — в чистоговорках и стихах.
- Дифференциация [сь] с близкими звуками: «Найди картинку», «Два домика», повторение пар слов.

+ дополнить для этого ребёнка

рис. 19 Программа коррекции: дефициты, упражнения из библиотеки, поле дополнения

Отчёт для родителей

Кнопка «Отчёт для родителей» в карте ребёнка открывает режим показа: навигации по приложению нет, на странице только данные этого ребёнка — экран можно повернуть к родителям. Вверху выбираются срез, срез для сравнения и состав отчёта: речевое развитие, нейродиагностика, результаты по пробам, программа коррекции, рекомендации.

← К карте ребёнка

Режим показа: на странице только данные этого ребёнка.

СРЕЗ

2026–2027 · НГ

СРАВНИТЬ С

2025–2026 · КГ

☒ Речевое развитие
 ☒ Нейродиагностика
 ☒ Результаты по пробам
 ☒ Программа коррекции
 ☒ Рекомендации

Печать / PDF

Файл для родителей (.html)

Excel по ребёнку

Росток · результаты диагностики

Воронов Лев

ДАТА РОЖДЕНИЯ

08.06.2020 (6 лет 3 мес.)

ГРУППА

Группа № 5 «Рябинка» (пример)

ОБСЛЕДОВАНИЕ

2026–2027, начало года

СРАВНЕНИЕ С

2025–2026, конец года

ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

мама Воронова Мария Викторовна; папа Воронов Сергей Николаевич

Как читать результаты

0

 соответствует возрасту

1

 формируется — нужны регулярные занятия

2

 отстает от возрастной нормы — нужна коррекционная работа

3

 значительно отстает — нужна систематическая коррекционная работа

Итог по речевому развитию за период: **улучшение** (средний балл 2,25 → 1,74; меньше — ближе к норме).

Речевое развитие

1,74 2 -0,51

РАЗДЕЛ	КГ 25/26	НГ 26/27	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
Звукопроизношение	3	2	отстает от возрастной нормы — нужна коррекционная работа
Фонематические процессы	3	2	отстает от возрастной нормы — нужна коррекционная работа
Лексика	3	2	отстает от возрастной нормы — нужна коррекционная работа
Грамматический строй	3	3	значительно отстает — нужна систематическая коррекционная работа
Связная речь	2	1	формируется — нужны регулярные занятия

рис. 20 Отчёт для родителей: уровни с понятными пояснениями, профиль, динамика

КНОПКА	РЕЗУЛЬТАТ
Печать / PDF	Печать на бумагу или «Сохранить как PDF» в окне печати браузера. Элементы управления в печать не попадают, разрывы страниц не режут таблицы и графики
Файл для родителей (.html)	Один файл со всем отчётом и графиками: его можно отправить родителям, он открывается в любом браузере, в том числе на телефоне, без доступа к приложению
Excel по ребёнку	Книга с листами «Уровни» (все срезы), «Пробы» (все отметки), «Родители» (контакты) и «Программа» (упражнения, дополнения, рекомендации)

PDF: первая страницаPDF: программа коррекцииPDF: рекомендации и подпись

Контакты на телефоне

Програма на телефоне

Отчёт на телефоне

Библиотека на телефоне

10 Методика расчёта

Единая шкала

БАЛЛ	ЗНАЧЕНИЕ
0	возрастная норма
1	функции в процессе формирования, требуется развитие
2	несоответствие возрастной норме, необходима коррекция
3	выраженное несоответствие норме, необходима коррекция

От баллов к уровню

среднее раздела = сумма баллов / число ЗАПОЛНЕННЫХ проб

уровень 0	среднее < 0,6
уровень 1	$0,6 \leq \text{среднее} < 1,6$
уровень 2	$1,6 \leq \text{среднее} < 2,1$
уровень 3	среднее $\geq 2,1$

средний балл блока = среднее арифметическое средних по разделам блока

Пороги – зеркальное отражение формулы Excel (0,9 / 1,4 / 2,4) для перевёрнутой шкалы:

$3 - 0,9 = 2,1$; $3 - 1,4 = 1,6$; $3 - 2,4 = 0,6$. Ребёнок, получавший в Excel уровень N, здесь получает уровень $3 - N$.

Итог коррекционной работы

Δ = средний балл на начало – средний балл на конец

возрастная норма	уровень на конец равен 0
значительное улучшение	$\Delta \geq 1,0$
улучшение	$0,3 \leq \Delta < 1,0$
без выраженной динамики	$-0,3 < \Delta < 0,3$
отрицательная динамика	$\Delta \leq -0,3$

Состав методики

РАЗДЕЛ	ПРОБ	ТИП ОТМЕТКИ
Звукопроизношение	25	этап работы (Н, Д, А, П, ×)
Фонематические процессы	13	0–3
Лексика	12	0–3
Грамматический строй	6	0–3
Связная речь	3	0–3
Нейродиагностика: 10 сфер	80	0–3
Латеральный профиль	3	правый / левый
Стратегия сканирования	1	один из пяти вариантов
Ошибки, наблюдаемые симптомы	14	есть / нет

Перечень проб хранится в одном файле `src/data/methodology.js`: добавить пробу или раздел можно, не трогая остальной код. Эта же справка встроена в приложение (значок «?» в шапке).

Справка по методике

Как считаются баллы, уровни и итог — и чем расчёт отличается от прежней таблицы Excel.

01 Единая шкала

Каждая проба оценивается от 0 до 3. Шкала одна для речевого блока и нейродиагностики — так, как она описана в листе параметров исходного файла:

БАЛЛ	ЗНАЧЕНИЕ
0	возрастная норма
1	функции в процессе формирования, требуется развитие
2	несоответствие возрастной норме, необходима коррекция
3	выраженное несоответствие норме, необходима коррекция

В прежнем файле протоколы велись в обратную сторону: 3 — норма, 0 — нарушено. При загрузке Excel баллы переводятся автоматически (3 – x), поэтому **снижение** балла теперь означает улучшение.

02 Звукопроизношение


Для звука отмечается этап работы. Каждый этап имеет балл по той же шкале; пустые звуки в расчёт не входят — как функция СЧЁТ3 в Excel.

ЗНАК	ЭТАП	БАЛЛ
Н	норма	0
Д	дифференциация	1
А	автоматизация	2
П	постановка / вызывание	3
х	нарушен, работа не начата	3


рис. 21 Встроенная справка по методике

11 Работа на телефоне


Вёрстка строится от телефона к большому экрану: проверена на ширинах 375–390, 768, 1024 и 1440 px. Страница никогда не прокручивается по горизонтали — широкие таблицы прокручиваются внутри себя.

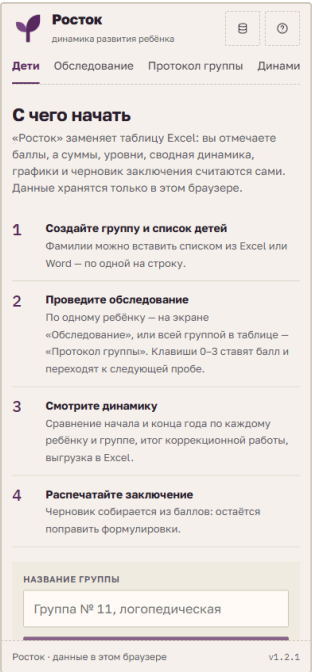

Стартовый экран

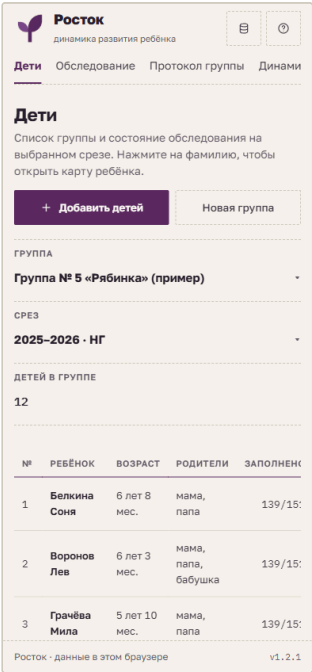


Дети: фильтры столбцом, кнопки на всю ширину

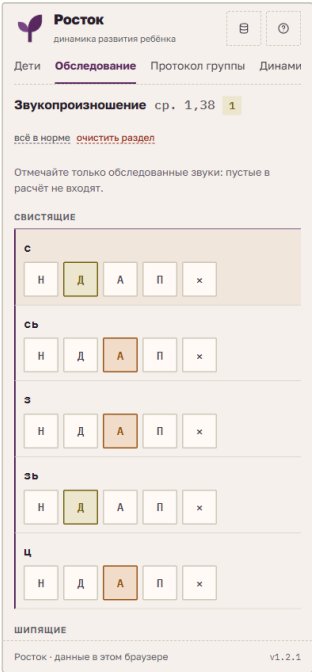

Обследование: этапы звука, отметки 44 px



Шкала 0–3: подпись над отметками

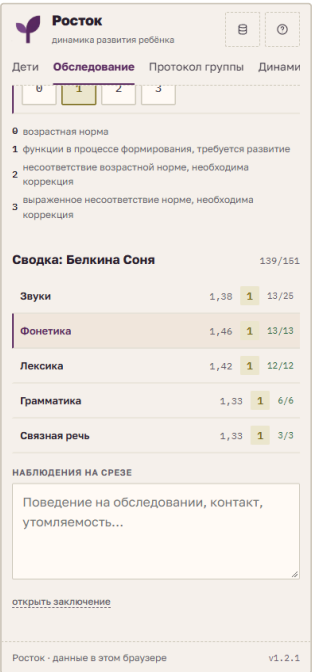

Сводка по ребёнку — под проблами



Протокол: фамилии закреплены слева



Динамика: показатели



Графики перестраиваются под ширину




«Гантели» и радар



Распределение по уровням



Карта ребёнка

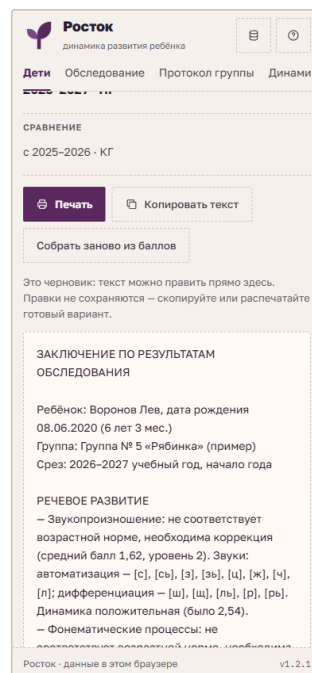

Заключение

Правила адаптивности

- Зоны касания не меньше 44 px: отметки, строки списков, вкладки, кнопки; на компьютере они уплотняются до 34 px.
- Поля ввода на телефоне набраны 16 px — мобильный Safari не масштабирует страницу при фокусе.
- Навигация переносится на вторую строку, ничего не прячется в «гамбургер».
- Двухколоночные экраны складываются в одну колонку ниже 1024 px; фильтры встают столбцом ниже 768 px.
- Графики измеряют ширину контейнера и перестраивают оси — подписи остаются читаемыми, а не уменьшаются вместе с картинкой.
- Двойное касание ячейки протокола не приближает страницу (touch-action: manipulation).

12 Администрирование: данные и словари



Сведения о детях относятся к закрытой документации специалиста. Приложение не имеет сервера и ничего не отправляет в сеть: данные лежат в **локальной базе данных браузера** (IndexedDB) на том компьютере, где введены. Этот компьютер находится у специалиста, в России, поэтому требование закона о хранении персональных данных граждан РФ в России выполняется без собственного сервера.

Раздел открывается значком базы данных в шапке и состоит из двух вкладок: «Данные» и «Словари».

Данные: локальная база

**Росток**
динамика развития ребёнка

ДетиОбследованиеПротокол группыДинамикаУпражнения



Администрирование

Локальная база данных, защита паролем, резервные копии и точки восстановления, загрузка прежнего файла Excel, учебные годы. Сведения о детях хранятся только в этом браузере и нигде не отправляются.

ДанныеСловариКомпоненты

Локальная база данныхгрупп 1 · детей 12

ГДЕ ХРАНЯТСЯ ДАННЫЕ	IndexedDB — встроенная база этого браузера, на этом компьютере. На сервер ничего не отправляется.
ЗАЩИТА	без пароля
ЗАНЯТО	100 КБ
ХРАНЕНИЕ	браузер может очистить базу при нехватке места запросить постоянное
последняя копия в файл	ещё не делалась

Защита паролем

Сейчас база не зашифрована: любой, кто сядет за этот компьютер, увидит данные детей. Включите защиту — данные будут храниться зашифрованными (AES-256), а для входа понадобится пароль.

🔒 Включить защиту

Резервная копия в файл

Копия защищает от поломки компьютера и очистки браузера и переносит данные на другой компьютер. Без защиты паролем копия не зашифрована — храните её как закрытый документ. Делайте копию раз в неделю.

⬇️ Выгрузить копию

⬆️ Восстановить из копии

Восстановление заменяет все текущие данные содержимым файла; прежнее состояние сохраняется точкой восстановления.

Росток — динамика развития ребёнка · данные хранятся только в этом браузереv1.4.0

рис. 22 Администрирование → Данные: сведения о базе и защита паролем

Все данные — группы, дети, контакты родителей, отметки, программы, библиотека упражнений и словари — хранятся в IndexedDB, встроенной базе данных браузера. Отметки каждого ребёнка лежат отдельной записью, поэтому правка балла записывает в базу несколько килобайт, а не всё целиком. Изменения сохраняются автоматически через четверть секунды после последней правки и сразу при закрытии вкладки. Данные, которые хранились в прежних версиях (до 1.5), при первом открытии переносятся в базу сами.

СВЕДЕНИЕ	ЧТО ОЗНАЧАЕТ
Занято	сколько места база занимает в браузере; сотня детей — это сотни килобайт
Хранение	«постоянное» — браузер не удалит базу при нехватке места. Если хранение не постоянное, кнопка «запросить постоянное» просит браузер об этом
Последняя копия в файл	дата последней резервной копии; если копии нет больше недели, над страницами появляется напоминание

Защита паролем

Если за компьютером работает не только специалист, базу стоит зашифровать. «Включить защиту» задаёт пароль (не короче 8 символов), и все записи базы перешифровываются алгоритмом AES-256; ключ выводится из пароля (PBKDF2, 310 000 итераций) и существует только в памяти открытой вкладки. После этого:

- при открытии приложения появляется экран входа — без пароля данные нечитаемы даже при прямом доступе к файлам браузера;
- после простоя база блокируется сама — через 5, 15 (по умолчанию), 30 или 60 минут; заблокировать сразу можно значком замка в шапке;
- резервная копия в файл тоже шифруется этим паролем;
- пароль можно сменить или снять защиту — база перешифруется.

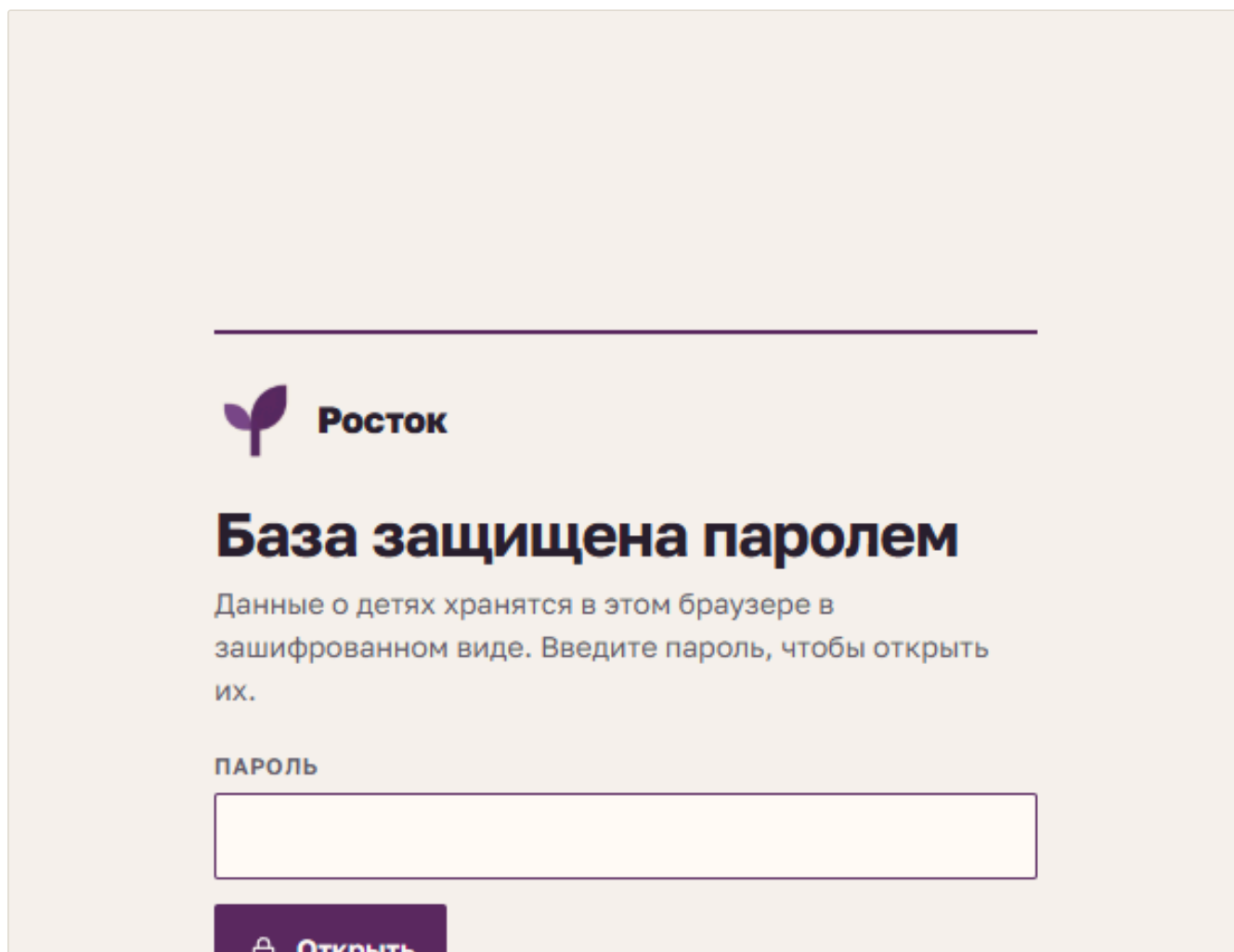


рис. 23 Экран входа в зашифрованную базу

Пароль нигде не хранится, восстановить его нельзя. Если пароль забыт, данные расшифровать невозможно: экран входа предложит удалить зашифрованную базу и начать заново, а данные вернуть из резервной копии. Запишите пароль и храните его отдельно.

Шифрование работает только когда приложение открыто по защищённому адресу (<https://>) — так работает опубликованная версия. При открытии по незащищённому

адресу приложение сообщает об этом вместо кнопки включения защиты.

Резервные копии и точки восстановления

Росток

динамика развития ребёнка

Дети

Обследование

Протокол группы

Динамика

Упражнения

Резервная копия в файл

Копия защищает от поломки компьютера и очистки браузера и переносит данные на другой компьютер. Без защиты паролем копия не зашифрована — храните её как закрытый документ. Делайте копию раз в неделю.

Выгрузить копию

Восстановить из копии

Восстановление заменяет все текущие данные содержимым файла; прежнее состояние сохраняется точкой восстановления.

Точки восстановления

Создать сейчас

Копии базы внутри браузера: раз в день перед первой правкой, а также перед восстановлением и загрузкой Excel. Хранятся 14 последних. Помогают откатить ошибку, но не заменяют копию в файл.

когда	почему	групп	детей	
28.09.2026, 19:52	ежедневная	1	12	восстановить

Прежний файл Excel

Книга «Динамика речевого развития» (листы «Звук...», «Л.Г.С....», «Фонетика...») загружается как новая группа: переносятся фамилии и все проставленные баллы. В прежнем файле 3 означало норму — при загрузке шкала переводится в принятую здесь (0 — норма).

Загрузить файл Excel

Добавить группу-пример

Учебные годы и срезы

учебный год	срезы	детей с данными	
2025–2026	НГ — начало года · КГ — конец года	12	удалить

Росток — динамика развития ребёнка · данные хранятся только в этом браузере

v1.4.0

рис. 24 Резервная копия в файл и точки восстановления

Росток — документация

36

ДЕЙСТВИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ
Выгрузить копию	файл .json со всеми данными и словарями; при включённой защите — зашифрован паролем базы. Рекомендуется раз в неделю; этим же файлом данные переносятся на другой компьютер
Восстановить из копии	заменяет текущие данные содержимым файла; для зашифрованной копии спрашивает пароль, который был у базы при выгрузке. Перед восстановлением текущие данные сохраняются точкой восстановления
Точки восстановления	копии базы внутри браузера: раз в день перед первой правкой, перед восстановлением из файла и перед загрузкой Excel, а также вручную кнопкой «Создать сейчас». Хранятся 14 последних; «восстановить» возвращает данные к выбранному моменту. Помогают откатить ошибку, но не спасают при поломке компьютера — для этого нужна копия в файл
Загрузить файл Excel	прежняя книга «Динамика речевого развития» (.xls или .xlsx) становится новой группой: фамилии, четыре среза, все отметки; шкала переводится автоматически
Учебные годы	добавление следующего года (срезы НГ и КГ) и удаление года вместе с его баллами
Удалить все данные	удаляет группы, детей, баллы и точки восстановления из этого браузера; настройки защиты паролем остаются

Росток
динамика развития ребёнка

Дети Обследование Протокол группы Динамика

Резервной копии данных ещё нет. Данные хранятся только в этом браузере: сделайте копию в файл.

[сделать копию](#) [позже](#)

Дети

Список группы и состояние обследования на выбранном срезе. Нажмите на фамилию, чтобы открыть карту ребёнка.

[+ Добавить детей](#) Новая группа

ГРУППА
Группа № 5 «Рябинка» (пример)

СРЕЗ
2025-2026 · НГ

ДЕТЕЙ В ГРУППЕ
12

№	РЕБЁНОК	ВОЗРАСТ	РОДИТЕЛИ	ЗАПОЛНЕН
1	Белкина Соня	6 лет 8 мес.	мама, папа	139/15:

Росток - данные в этом браузере v1.4.0

Напоминание о копии на телефоне

Очистка данных сайта в настройках браузера или окно «инкогнито» удаляют и локальную базу. Резервная копия в файл — единственная защита от этого, поэтому приложение напоминает о ней через неделю.

Словари

Вкладка «Словари» собирает все словарные значения приложения в одном месте. Слева — список словарей, сгруппированный по назначению, у изменённых — отметка «изм.» с числом правок; справа — таблица значений. Правки сохраняются сразу и видны на всех экранах, в заключении, отчёте для родителей и выгрузках Excel.

Росток

динамика развития ребёнка

Дети

Обследование

Протокол группы

Динамика

Упражнения

☰

⚙

Администрирование

Все словарные значения приложения: названия уровней и этапов, разделов и проб, итогов, направлений работы, подсказки для контактов родителей.

Данные

Словари

ОЦЕНКА

Уровни 0–3

Этапы звукопроизношения

Варианты ответов

Стратегии сканирования

МЕТОДИКА

Блоки методики

Разделы

Группы проб

Пробы

Направления работы

РЕЗУЛЬТАТЫ

Уровни 0–3

Название уровня — в легендах и графиках; описание — в протоколах и справке; формулировки — в заключении и отчёте для родителей.

код	название	описание балла	в заключении	для родителей
0	норма	возрастная норма	соответствует возрастной норме	соответствует возрасту
1	формируется	функции в процессе формирования, требуется развитие	в процессе формирования, требуется развитие	формируется — нужны регулярные занятия
2	нужна коррекция	несоответствие возрастной норме, необходима коррекция	не соответствует возрастной норме, необходима коррекция	отстаёт от возрастной нормы — нужна коррекционная работа
3	выраженное несоответствие	выраженное несоответствие норме, необходима коррекция	выраженно не соответствует норме, необходима коррекция	значительно отстаёт — нужна систематическая коррекционная работа

рис. 25 Словарь «Уровни 0–3»: название, описание балла, формулировки для заключения и для родителей

ГРУППА	СЛОВАРЬ	ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Оценка	Уровни 0–3	легенды и графики, протоколы и справка, черновик заключения, отчёт для родителей
	Этапы звукопроизношения	знаки в протоколе и на кнопках (Н, Д, А, П, ×) и названия этапов; балл этапа не меняется
	Варианты ответов	латеральность (правый / левый), ошибки и симптомы (нет / есть)
	Стратегии сканирования	варианты пробы «Стратегия сканирования зрительного поля»
Методика	Блоки, разделы, группы проб, пробы	полные и краткие названия во всех экранах; код пробы не меняется, поэтому баллы и упражнения сохраняются
	Направления работы	программа коррекции и рекомендации в заключении
Результаты	Итоги коррекционной работы	экран «Динамика», карта ребёнка, заключение, выгрузки; правила расчёта не меняются
	Пороги дефицита, срезы	выбор порога в программе; «начало года», «конец года» в отчётах
Контакты	Кем приходится, виды телефонов, виды адресов	выпадающие списки в карточке родителя

- **Очищенное поле** возвращает значение по умолчанию — оно показано серым в пустом поле; под изменённым полем подписано исходное значение.
- **«Вернуть значения по умолчанию»** сбрасывает весь словарь, с подтверждением.
- **Списки** («Кем приходится», виды телефонов и адресов) — значения можно добавлять, удалять и менять местами стрелками. Значение, удалённое из словаря, сохраняется у контактов, где уже выбрано.
- Разделы, группы проб и пробы выбираются по разделу — список проб не превращается в простыню из 150 строк.
- Словари входят в резервную копию на вкладке «Данные» и переносятся вместе с ней на другой компьютер.

Росток

динамика развития ребёнка

Дети

Обследование

Протокол группы

Динамика

в протоколах и справке; формулировки – в заключении и отчёте для родителей.

0

название

норма

описание балла

возрастная норма

в заключении

соответствует возрастной норме

для родителей

соответствует возрасту

1

название

формируется

описание балла

функции в процессе формирования, требуется развитие

в заключении

в процессе формирования, требуется развитие

Росток

динамично в этом браузере

1.1.2.1



Росток

динамика развития ребёнка

📄

🔍

Дети

Обследование

Протокол группы

Динамика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТПМК

ТНР, ОНР III уровня...

ЗАМЕТКИ

Анамнез, особенности, договорённости с родителями

РОДИТЕЛИ И РОДСТВЕННИКИ

КЕМ ПРИХОДИТСЯ

мама

✕

🗑

ФИО

Воронова Мария Викторовна

мобильный

✕

🗑

+7 900 000-11-01

рабочий

✕

🗑

+7 900 000-11-04

эл. почта

🗑

mama2@example.ru

Росток - данные в этом браузере

v1.3.1

13 Дизайн-система и устройство кода

Дизайн

Использована дизайн-система проекта «Тёплый мел» (DESIGN.md): одна поверхность без карточек и теней, пунктирные разделители, радиус 2 px, моноширинные цифры, одно главное действие на экран. Изменены цветовая схема и логотип.

роль	было	схема «ЕЖЕВИКА»
Акцент	 #1F3A5F тёмно-синий	 #5A2B63 ежевичный
Акцент светлее	 #2F5480	 #7A4A89
Бумага	 #F7F5F0	 #F8F4EB
Чернила	 #1F2B3A	 #2A2230
Логотип	два наложенных квадрата	росток из двух листьев, сгенерирован в Higgsfield

Иллюстрации этой документации также созданы в Higgsfield в палитре приложения.

Библиотека компонентов

Все элементы интерфейса собраны из своей библиотеки `src/ui/`. Системные элементы браузера — выбор даты, флажок, выпадающий список, всплывающая подсказка — не используются: их вид задаёт браузер, а не дизайн-система, и на разных компьютерах он разный. Витрина со всеми компонентами и их состояниями — «Администрирование → Компоненты».

Импорт одной строкой: `import { DatePicker, Checkbox, Dropdown } from './ui'`.
Системные элементы браузера — выбор даты, флажок, выпадающий список, подсказка — в приложении не используются.

Кнопки .btn-primary · .btn-ghost · .text-action · .icon-btn

+ Главное действие ↓ Второстепенное Недоступно действие в строке **удалить**  

Поля ввода .input

ОБЫЧНОЕ ЗАПОЛНЕННОЕ МНОГОСТРОЧНОЕ

Фамилия Имя Отчество Воронова Мария Викторовна Заметки специалиста

Выпадающий список <Dropdown variant="plain | light" />

НАД КОНТЕНТОМ — PLAIN В ФОРМЕ — LIGHT ПУСТОЙ

Группа № 11, логопедическая Группа № 11, логопедическая выберите

Дата <DatePicker value min max onChange />

С ДАТОЙ ПУСТАЯ

08.06.2020  дд.мм.гггг 

Дату можно набрать цифрами — точки встанут сами — или выбрать в календаре. Стрелки двигают день, PageUp / PageDown — месяц, Shift + PageUp / PageDown — год, Enter — выбрать, Esc — закрыть. Выбрано: 2020-06-08

Флажок <Checkbox checked onChange />

☒ Законный представитель ☐ Не отмечен ☒ Недоступен

Выбор файла <FilePick accept onFile />

 Выбрать или перетащить файл Файл не выбран — перетащите его на кнопку

Отметки балла .mark · .mark.lvl-N

0 1 2 3 Н Д А П x

Уровни и динамика <Level /> · <Delta /> · <DistBar /> · <LevelLegend />

рис. 28 Витрина библиотеки: кнопки, поля, списки, дата, флажки, файлы, отметки, уровни, вкладки, подсказка, графики, иконки

Поле даты. Дату рождения быстрее набрать цифрами: «07032019» превращается в 07.03.2019, точки ставятся сами. Кнопка с календарём открывает свой календарь: месяц и год выбираются из списков, стрелки двигают день, PageUp / PageDown — месяц, Shift + PageUp / PageDown — год, Enter выбирает, Esc закрывает. Будущие даты для даты рождения недоступны; несуществующая дата (31.02) подписывается «Такой даты нет».

Список группы и состояние обследования на выбранном срезе. Нажмите на фамилию, чтобы открыть карту ребёнка.

+ Добавить детей Новая группа

Один ребёнок с родителями Списанием фамилий

ФАМИЛИЯ И ИМЯ РЕБЁНКА ДАТА РОЖДЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТПМПК

 дд.мм.гггг  обязательно

РОДИТЕЛИ И РОДСТВЕННИКИ

КЕМ ПРИХОДИТСЯ	ФИО
мама	Фамилия Имя Отчество
мобильный	+7 ...
ПРИМЕЧАНИЕ	Удобное время для связи, кто забирает ребёнка...

☒ Законный представитель

Календарь: сентябрь 2026

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

+ телефон + почта + адрес

рис. 29 Календарь в форме добавления ребёнка: сегодня подчёркнуто, будущие дни погашены

КОМПОНЕНТ	ВМЕСТО	НАЗНАЧЕНИЕ
Dropdown	список браузера	выбор группы, среза, раздела, роли, вида телефона и адреса
DatePicker	календарь браузера	дата рождения: маска и свой календарь
Checkbox	флажок браузера	законный представитель, пробы в программе, состав отчёта
Подсказка (data-tip)	системная подсказка	расшифровка уровней, этапов, кнопок-иконок
FilePick	поле выбора файла	загрузка Excel и резервной копии, в том числе перетаскиванием

Шапка, футер и версия

Шапка с меню закреплена сверху и остаётся на месте при прокрутке длинных таблиц и программ; на телефоне меню — одна строка с горизонтальной прокруткой, чтобы шапка не занимала пол-экрана. Футер закреплён снизу: слева — название и напоминание, что данные хранятся в этом браузере, справа мелким серым шрифтом — версия приложения (при наведении — дата сборки). При печати шапка и футер скрываются.

Версионность

Версия задаётся в `package.json` по правилам семантического версионирования (МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ) и при сборке подставляется в футер. Изменения каждой версии описаны в `CHANGELOG.md`. Выпуск новой версии — одна команда:

```
npm run release:patch    исправления:      1.2.0 → 1.2.1
npm run release:minor    новые возможности: 1.2.0 → 1.3.0
npm run release:major    несовместимые изменения: 1.2.0 → 2.0.0
```

Команда поднимает версию, создаёт коммит и тег `vX.Y.Z` и отправляет их на GitHub. По тегу GitHub Actions создаёт релиз, а Vercel публикует новую сборку. Описание каждого релиза — **изменения по сравнению с предыдущей версией**: раздел `CHANGELOG`, список коммитов с прошлого тега и ссылка на полное сравнение версий. Перед выпуском в `CHANGELOG` добавляется раздел новой версии.

Структура проекта

src/	
data/methodology.js	пробы, шкалы, рекомендации
lib/calc.js	баллы → среднее → уровень → итог
lib/store.js	снимок данных в памяти, запись в базу пачками, действия
lib/excel.js	импорт прежней книги, выгрузка .xlsx (SheetJS, загружается по требованию)
lib/report.js	текст заключения
lib/program.js	дефициты → программа коррекции
lib/dicts.js	реестр словарей: значения по умолчанию и правки
lib/localdb.js	локальная база: IndexedDB, записи по коллекциям, точки восстановления, копии
lib/crypto.js	шифрование паролем: PBKDF2 + AES-GCM 256
lib/idb.js	обёртка над IndexedDB
ui/	библиотека компонентов: Dropdown, DatePicker, Checkbox, Tooltip, FilePick, Level, Charts, Icons
data/dictionaries.js	словарные значения вне методики
data/exercises.js	образцы упражнений по пробам
lib/demo.js	группа-пример
components/Charts.jsx	графики на SVG: радар, «гантели», кольцо, линия, столбцы
components/	Dropdown, FilterCard, Level, Selectors, Icons
components/RelativesEditor.jsx	контакты: несколько телефонов, почт и адресов
pages/	экраны приложения
theme.js, index.css	токены и стили; все медиазапросы — в index.css
public/logo.png	логотип
DOC/	исходная книга Excel и эта документация

Источники

- Протокол логопедического обследования ребёнка — psyjournals.ru, «Аутизм и нарушения развития», 2005, № 1
- Мониторинг речевого развития в логопедической группе — nsportal.ru
- Диаграмма результатов логопедической работы на начало и конец года — logoped.name
- Рекомендуемая документация педагога-психолога — ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга
- Глозман Ж. М., Потанина А. Ю., Соболева А. Е. Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте
- Ахутина Т. В. Методы нейропсихологического обследования детей 6–9 лет